

Part Number:	L011117	BALTS00191 Version 13.0 Template 4 Inserts	
Category and Description:	Package Insert, Rovers® Cervex-Brush® Combi, Multilingual	Rev from: 01	Rev to: 02
		Job Number:	581-18

Catalog Number: 491462

Blank (Sheet) Size: Length: 11.69" (297 mm) Width: 16.53" (420 mm)


Number of Pages: 2 Number of Sheets: 1

Page Size: Length: 5.84" (148.5 mm) Width: 1.85" (47 mm)

Ink Colors: Number of Colors: 1 PMS #: 287 Blue Final Folded Size: 148.5" x 47 mm

Printed Two Sides: Yes: ☒ No: ☐ Cover Panel: 1.73" (44 mm) x 5.84" (148.5 mm)

Style (see illustrations below): # N/A

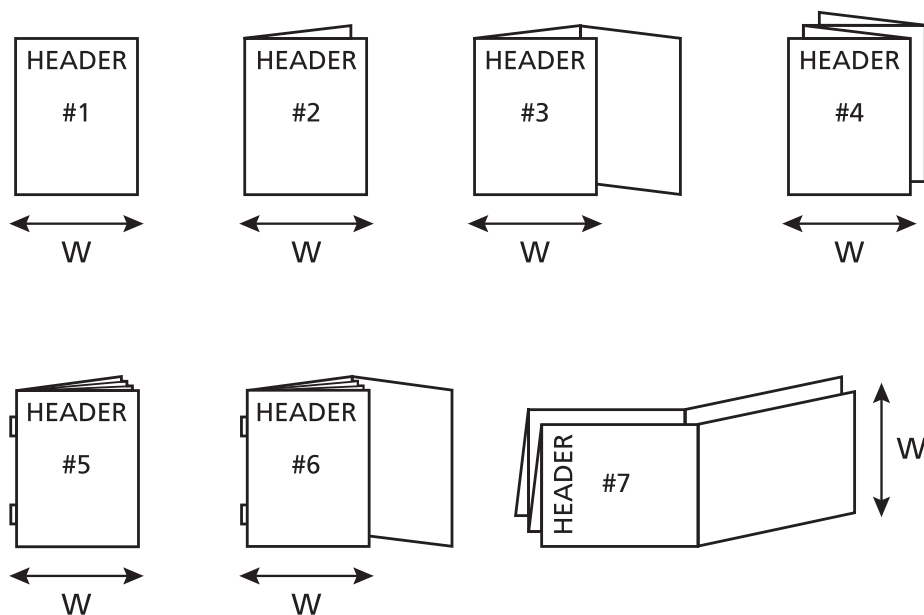

Vendor Printed: ☒ Online / In House Printed: ☐ Web Printed: ☐

See Specification control no. ZPR 491462 for material information.



BD Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, MD 21152 USA

Company confidential. This document is the property of Becton, Dickinson and Company and is not to be used outside the company without written permission. Graphics are approved by Becton, Dickinson and Company. Supplier has the responsibility for using the most current approved revision level.

Revised By:

REVISED BY
By Sonia F.Thompson at 4:05 pm, Apr 25, 2018

Proofing
Approved By:

PROOFING APPROVED BY
By Terrence Means at 2:09 pm, Apr 26, 2018

Third Eye By:

THIRD EYE BY
By Nichole Graham at 4:41 pm, Apr 26, 2018

Note to Printer:
All lines and text in keyline blue color
are not to be printed.

Cervical Cell Sampler, non-sterile, for single use only. Do not use if package has been damaged. <i>Contra-indications:</i> The Rovers® Cervex-Brush® Combi should not be used during pregnancy. <i>Instructions for use</i> (1) Insert the central bristles of the brush into the endocervical canal. (2) Maintaining gentle pressure, rotate the Rovers® Cervex-Brush® Combi two times in a clockwise direction. Liquid-based Pap preparation A 1. Insert the Rovers® Cervex-Brush® Combi into the vial with preservative fluid and follow the instruction given by the manufacturer of the Pap Preparation method. 2. Reseal the vial. INTENDED FOR SINGLE USE ONLY (DO NOT REUSE) Reuse causes contamination and misdiagnosis. To be used only by qualified medical personnel.	Abstrichbürste zur Entnahme von Zervikalzellen, nicht steril, nur für Einmalgebrauch. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. <i>Kontraindikationen:</i> Die Rovers® Cervex-Brush® Combi sollte nicht während der Schwangerschaft angewendet werden. <i>Gebrauchsanweisung:</i> (1) Führen Sie die mittleren Borsten der Bürste in den Endozervikalkanal ein. (2) Drehen Sie die Cervex-Brush® Combi unter sanftem Druck zwei Mal im Uhrzeigersinn. Dünnschicht-Zytologie A 1. Führen Sie die Cervex-Brush® Combi in die Flasche mit der Konservierungslösung ein und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers der Pap-Abstrichmethode. 2. Verschließen Sie die Flasche. NUR FÜR DEN EINMALIGEN GEBRAUCH BESTIMMT (NICHT WIEDERVERWENDBAR) Wiederverwendung kann zu Kontamination und Fehldiagnose führen. Nur von qualifiziertem medizinischen Personal zu verwenden.	Ecouvillon pour cellules cervica-les, non-stérile, À usage unique. Ne pas utiliser quand l'emballage est détérioré. <i>Contre-indications:</i> Ne pas utiliser pendant la grossesse. <i>Mode d'emploi:</i> (1) Insérez les fibres centrales de la brosse dans le canal endocervical. (2) Tourner 2 fois la Cervex-Brush® Combi dans le sens des aiguilles d'une montre, en maintenant une pression légère. Préparation d'un liquide à base de Pap A 1. Introduirez la Rovers® Cervex-Brush® Combi dans le tube contenant le liquide conservateur et suivez les instructions du fabricant de la méthode de préparation Pap. 2. Refermez le tube. USAGE UNIQUE – NE PAS RÉUTILISER Toute réutilisation entraîne une contamination et des erreurs de diagnostic. Emploi réservé aux personnes médicalement habilitées	Dispositivo de toma de muestras de células cervicales, no estéril, de un solo uso. No lo utilice si la caja presenta daños. <i>Contraindicaciones:</i> El dispositivo Rovers® Cervex-Brush® Combi no debe utilizarse durante el embarazo. <i>Instrucciones de uso:</i> (1) Inserte las cerdas centrales del pincel en el canal endocervical. (2) Gire el Rovers® Cervex Brush® Combi dos veces hacia la derecha. Preparación de Papanicolaou basada en líquidos. A 1. Inserte el Rovers® Cervex-Brush® Combi en el vial con solución de conservación y siga las instrucciones indicadas por el fabricante del método preparación de Papanicolaou. 2. Vuelva a sellar el vial. INDICADO ÚNICAMENTE PARA UN SOLO USO (NO REUTILIZAR) La reutilización produce contaminación y diagnóstico incorrecto. Solo deberá utilizarlo el personal médico cualificado.	Campionatore di cellule cervicali, non sterile, esclusivamente monouso. Non utilizzare se la confezione risulta danneggiata. <i>Controindicazioni:</i> Rovers® Cervex-Brush® Combi non dovrebbe essere utilizzato durante la gravidanza. <i>Istruzioni per l'uso:</i> (1) Inserire le setole centrali della spatola nel canale endocervicale. (2) Esercitando una leggera pressione, ruotare Rovers® Cervex-Brush® Combi due volte in senso orario. Preparazione Pap a base liquida A 1. Inserire Rovers® Cervex-Brush® Combi nella fiala con conservante e seguire le istruzioni fornite dal produttore del metodo di preparazione Pap. 2. Risigillare la fiala. ESCLUSIVAMENTE MONOUSO (NON RIUTILIZZARE) Il riutilizzo può causare contaminazione e diagnosi errata. Ad uso esclusivo di personale medico qualificato.	Instrument voor het nemen van cervicale celmonsters, niet-steriel, voor eenmalig gebruik. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. <i>Contra-indicaties:</i> De Cervex-Brush® Combi niet gebruiken tijdens zwangerschap. <i>Instructies voor gebruik:</i> (1) Plaats de middelste haren van de borstel in het endocervicale kanaal. (2) Draai de Cervex-Brush® Combi met lichte druk twee maal rechtsom (met de klok mee). Dunne laag cytologie A 1. Steek de Cervex-Brush® Combi in de fiool met conserveervloeistof en volg de aanwijzingen van de fabrikant van de Pap-bereidings-methode. 2. Verzegel de fiool. BESTEMD VOOR EENMALIG GEBRUIK (NIET HERGEBRUIKEN) Hergebruik leidt tot verontreiniging en onjuiste diagnoses. Alleen te gebruiken door bevoegd medisch personeel.	glue dot <
---	--	---	---	--	---	--

