

Her giriřiminizde iğne batma riskiyle karşı karşıyasınız.

Avrupa’da her yıl bir milyon iğne batması olduđu tahmin edilmektedir,^{1,2,3,4} – bu günde 2,700’den fazla yaralanma anlamına gelir ve bu yaralanmaların %60’ı raporlandırılmamaktadır.^{5,6}



- Rapor edilen iğne batma yaralanmalarının %56’sı güvenli ürünler kullanılarak önlenir.⁷
- 20’den fazla patojen bulaşabilir.⁸
 - En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV’dir.
- Yaralananların %40’ı giriřimi yapan kişi değildir.⁹
- Her 8 vakadan 1’inde kaynak hasta belirlenemez.⁹
- Bu yaralanmalar strese, hastalıda, iğne gücü kaybına ve ölümcül virüslerin bulaşmasına neden olur.

BD Venflon™ Pro Safety

Güvenlikli IV kanül



Güvenlik protokollerinin kalbi

Yıllardır severek kullandığınız BD Venflon™
en yeni güvenlik mekanizmasıyla iğne batma
yaralanmaları ve kan sıçramalarına karşı şimdi daha güvenilir.

Gerçek güvenli IV Kanülün anatomisi


Port – ‘snap-cap’ tek hareketle kapanan portlu tasarım. Portun yanlışlıkla açık bırakılmasına engel olur.

İğne – Keskin iğne teknolojisi hem hasta konforu hem de giriş kolaylığı sağlamaktadır

Kanül malzemesi – BD Vialon™ biyomateryalinin IV komplikasyonları azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır.¹⁰⁻¹⁴

- Tromboflebiti azaltır
- Bükülmeye dirençlidir
- Damarda daha uzun kalıp süresi sağlar
- Gelişmiş giriş teknikleri sunar

Kanatlar – esnek kanatlar kanülü damarda sabitlet ve hastaya konforlu güvenlik sağlar

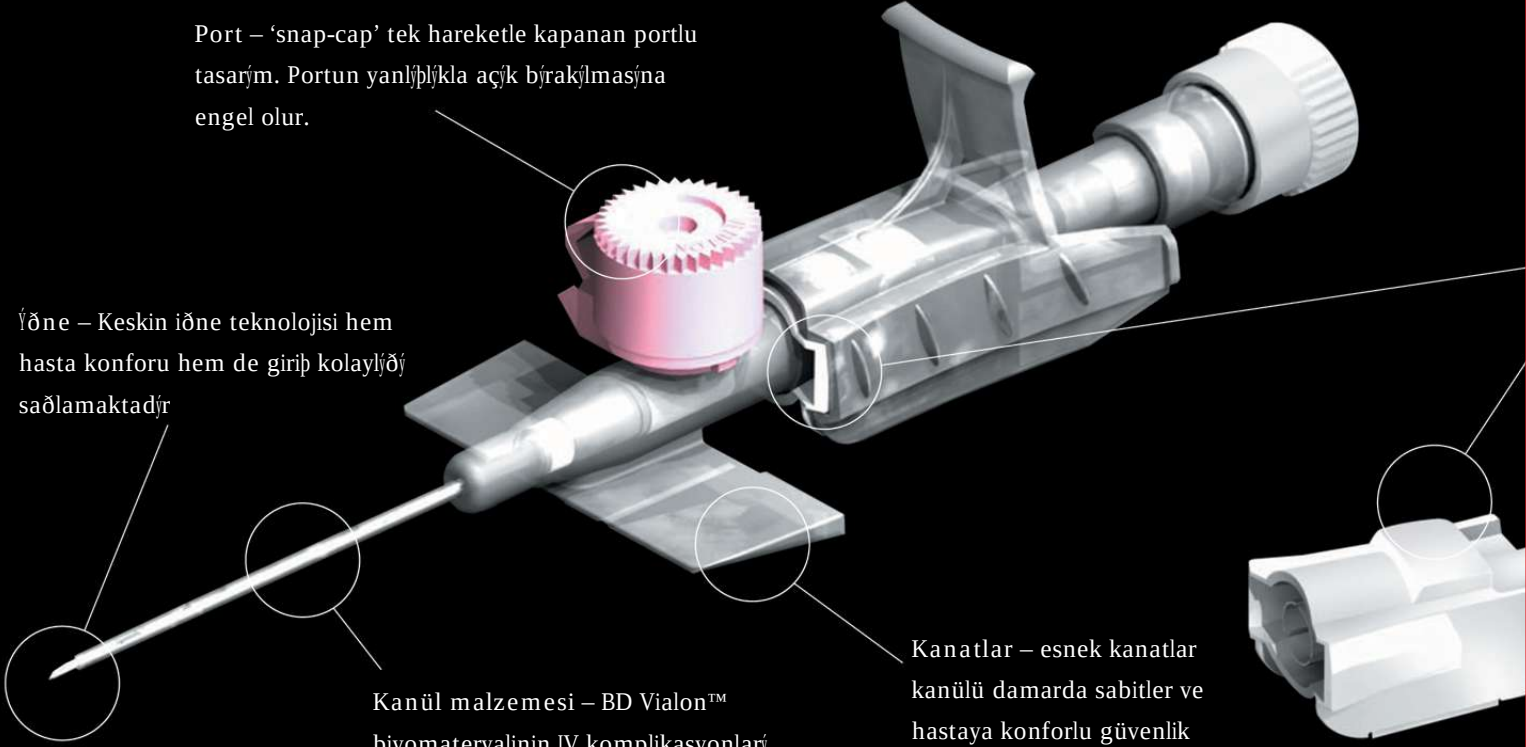

İðne Kılıfı

- İðne ıkardıldıðında otomatik aktivasyon
- Tamamen kapalı iðne ucu, iðne batmalarına karşı geliřmiř koruma saðlar
- İðnenin ıkartılması sırasnda beklenmedik kan teması olasılıđını ortadan kaldırır
- İðne güvenli biimde, keskin kenarları olmayan plastik muhafazanın iinde tutulur

Güvenlik Baðlantısı
iðne kılıfını aktive eder

Ergonomik tutma bölgesi
dizaynı – cihaz, eřitli gırıpım
tekniklerinin kullanılmasına izin
verecek řekilde ergonomik olarak
dizayn edilmiřtir.

BD Venflon™ Pro Safety
Güvenlik, güvenli ellerde

Gerçek güvenlik için geliptirilmip özellikler ve kanýtlanmıp klinik çalybmalar

BD Venflon™ Pro Safety'nin etkinliðinin temeli, kanüde kullanýlan eþsiz malzemedir. BD Vialon™ materyalinin hastanýn IV sonuçlarýný geliptirdiði 10 yýlý abkýn süredir yapýlan çalybmalarla kanýtlanmýþtır, sýklýkla kullanýlan FEP polimer kanüllerde karþýlaþýlan komplikasyonlarý engellemek için tasarlanmýþtır.¹⁰⁻¹⁴

Sonuç olarak; kanül performansý ile ilgili tromboflebit, infiltrasyon gibi komplikasyonlarýn daha az oluþmasýný saðlamýþ ve kavrama, damar içine girip özelliðini geliptirmiþtir. BD Venflon™ Pro Safety hem hastalar, hem kullanýcýlar için daha iyi bir ürün.

Yeni karþýlaþýtýrmaý klinik bir çalybmanýn sonuçlarý¹⁵

Kolay kullaným

- BD Venflon™ Pro Safety kanülünün girip gücünü, alternatif güvenli künüle göre kabul edilebilir olarak deðerlendiren klinisyenlerin sayýsý anlamlý ölçüde daha fazladýr.
- Kullanýcýlarýn çoðu BD Venflon™ Pro Safety'i kavramada bir deðiþiklik olmadan güvenli ve rahat bulmuþtur.

Üstün girip özellikleri

- Bütün kullanýcýlar BD Venflon™ Pro Safety kanülünün girip gücünü kabul edilebilir ve yüksek derecede kabul edilebilir olarak deðerlendirmiþtir.
- Önemli ölçüde daha çok klinisyen, BD™ Venflon Pro Safety kanülünün girip gücünü alternatif güvenli kanüle göre yüksek derecede kabul edilebilir olarak deðerlendirmiþtir.
- Geriye akýþýn görülmeye kolaydýr.

Beklenmeyen kan maruziyetini engeller

- Kana maruz kalýnma olasýlýðý, alternatif güvenli kanüle göre anlamlý ölçüde azdýr.

Genel tercih


- Kanülü kullanan klinisyenlerin 2/3'ü BD™ Venflon Pro Safety kanülünü alternatif kanüle tercih etmiþtir.

Ýðne ucu yaralanmalarýna karþý üstün korunma

- Klinisyenlerin %86'sýndan fazlasý BD Venflon™ Pro Safety'i ýðne ucu yaralanmalarýna karþý korunmada fazlasýyla yeterli olarak deðerlendirmiþtir.
- %64'ü ýðne ucu yaralanmasýna karþý korunmada mükemmel olarak deðerlendirilmiþtir.

Genel kabul edilebilirlik

- Klinisyenlerin %87'si kanülü kabul edilebilirinden daha fazla olarak deðerlendirmiþtir.

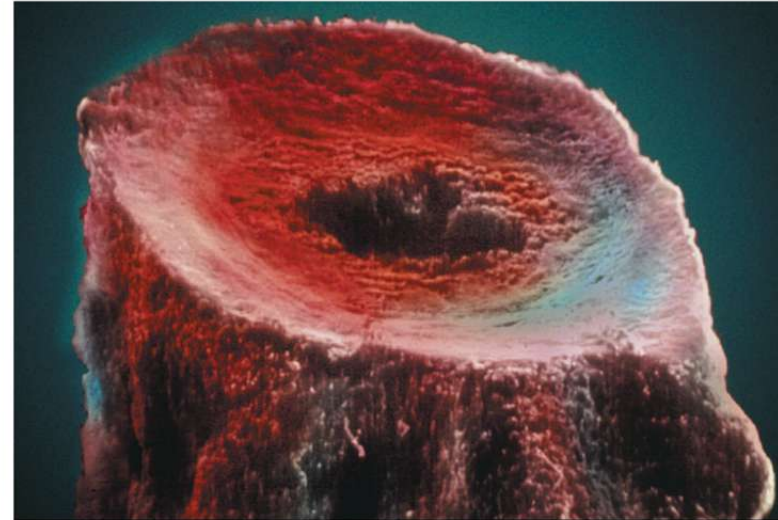

Kronik flebitli bir venin yatay kesitini gösteren elektron mikroskopisi

BD Venflon™ Pro Safety bütün departmanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

BD Venflon™ Pro Safety özel bakımdan genel servislere, acil servisten yoğun bakım ünitelerine kadar tüm klinik alanlarda kullanılabilecek özellikler sunmaktadır.




Klinik endikasyonların çoğuna uyan özellik yelpazesi

- Küçük veya fragil damarlara girişim kolaylığı
- Giriş ve damarda kalış süresince hasta konforu
- Tüm ISO renk kodlu ölçüler 14G – 22G
- Güvenilir giriş karakteristikleri
- Gelişmiş iğne ucu koruma
- Kana maruz kalmada azalma
- Hızlı geri akış
- Bolus dozlama için porta giriş imkanı
- Yüksek akım hızları
- Adaptörler ile uyumluluk
- Sık kullanılan sitotoksik ilaçlar ile uyumluluk
- Değişik giriş bölgelerine ve tekniklerine uygunluk


Güvenliğinizde büyük bir fark yaratın.

Yeni BD Venflon™ Pro Safety


Ürün Kodu	Ölçü/Renk	Kateter Özellikleri				Kutu Başına Adet / Koli
		Uzunluk mm	OD mm	ID mm	Akım hızı H ₂ O ml/dak	
393222	22G / Mavi	25	0.9	0.6	42	50/500
393224	20G / Pembe	32	1.1	0.8	67	50/500
393226	18G / Yeşil	32	1.3	1.0	103	50/500
393227	18G / Yeşil	45	1.3	1.0	103	50/500
393228	17G / Beyaz	45	1.5	1.2	133	50/500
393229	16G / Gri	45	1.8	1.4	236	50/500
393230	14G / Turuncu	45	2.0	1.6	270	50/500

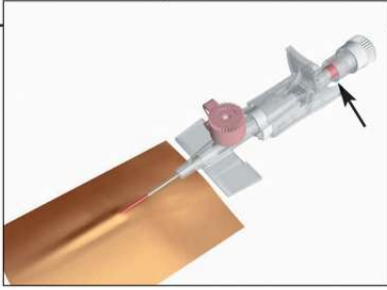

Ven ponksiyonunu yapın ve kan gelişini gözlemleyin.

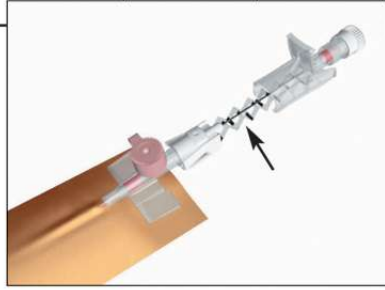

Kanülü geri çekerken iğne üzerinde plastik bağ uzar.

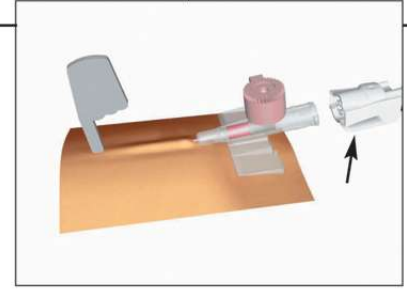

İğnenin tümüyle çıkarılmasıyla iğne koruma kapağı, otomatik olarak ucu kapatacaktır.



Becton Dickinson İhr. İhr. Ltd. Şti.
Büyükdere Cad., Üçyol Mevkii,
Noramin İş Merkezi, K: 1/105
No: 55 Maslak 34398 İstanbul
Tel: 00 90 212 328 2720
Faks: 00 90 212 328 2730

¹ EPINet Data. Dee May RGN, DMS. Period of Study: July 2000 to June 2001. ² Surveillance of Occupational Exposures in Italy: the SIROH program, Gabriella De Carli, Vincent Puro, Vincenzo Puro, Giuseppe Ippolito, and the SIROH group, SIROH, 6 - 2002. ³ EPINet Spain, 1996 - 2000. Hernandez - Navarrete MJ, Arribas - Llorent JL, Campins Marti M, Garcia de Codes Ilario A. ⁴ Risk of Hepatitis C Virus Transmission following Percutaneous Exposure in Healthcare Workers, 2003 - G De Carli, V Puro, G Ippolito, and the Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (SIROH) Group. ⁵ Doebebling BN, Vaughn TE, McCoy KD, et al. Percutaneous injury, blood exposure, and adherence to standard precautions: are hospital-based health care providers still at risk? Clin Infect Dis 2003;37:1006-1013. ⁶ Benitez Rodriguez E, Ruiz Moruno AJ, Cordoba Dona JA, et al. Underreporting of percutaneous exposure accidents in a teaching hospital in Spain. Clin Perform Qual Health Care 1999;7:88-91. ⁷ Potential for reported needlestick injury prevention among healthcare workers through safety device usage and improvement of guideline adherence: expert panel assessment. B.L. Cullen, et al. Journal of Hospital Infection (2006) 63, 445-451. ⁸ Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 1998a. ⁹ EPINet™ (Jan - Jun 2002). ¹⁰ Gaukroger PB, Roberts JG, Mannes TA. Infusion thrombophlebitis: a prospective comparison of 645 Vialon and Teflon cannulae in anaesthetic and postoperative use. Anaesth Intens Care 1988;16:265-271. ¹¹ Jacquot C, Fauvege B, Bru JP, Croize J, Calop J. Effect of type of material on thrombophlebitis risk with peripheral venous catheters. Ann Fr Anesth Réanim 1989;8:3-7. [French language, English abstract]. ¹² Maki DG, Ringer M. Risk factors for infusion-related phlebitis with small peripheral venous catheters: a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1991;114:845-854. ¹³ McKee JM, Shell JA, Warren TA, Campbell VP. Complications of intravenous therapy: a randomized prospective study - Vialon vs Teflon. J Invas Nurs 1989;12(5):288-295. ¹⁴ Myles PS, Buckland MR, Burnett WJ. Single versus double occlusive dressing technique to minimize infusion thrombophlebitis: Vialon and Teflon cannulae reassessed. Anaesth Intens Care 1991;19:525-529. ¹⁵ Data on file.

Güvenlik, güvenilir ellerde

BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company. © 2008 BD

Referans Numarası	Adet/Kutu	Gönderideki Adet	Ürün Adı	G
393222	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	22G
393224	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	20G
393226	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
393227	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
393228	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	17G
393229	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	16G
393230	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	14G
393202	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	22G
393204	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	20G
393206	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
393207	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
393208	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	17G
393209	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	16G
393210	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	14G
394251	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	22G
394252	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	20G
394257	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
394253	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	18G
394254	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	17G
394255	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	16G
394256	50	500	BD Venflon™ Pro Safety	14G