

ORDERING INFORMATION

販売名：BD アビテン

カタログ番号	仕様	規格	包装単位
1010020	フラワータイプ 	1g	6入

販売名：BD アビテン

カタログ番号	仕様	規格	包装単位
1010090	シートタイプ 	70mm×35mm (0.8g)	6入
1010110		70mm×70mm (1.6g)	

承認番号: 30300BZX00066000
 クラス分類: 高度管理医療機器(クラスIV)
 一般的名称: コラーゲン使用吸収性局所止血材
 償 区 分: 微線維性コラーゲン



Reference:

- Price P. et al. Surgical technology for the surgical technologist: a positive care approach. 2nd ed. Clifton Park, NY: Thomson-Dermal Learning, 2004.
- 各種手術におけるBD アビテン™の使用に関する詳細は、電子添文(注意事項等情報)をご参照ください。

・事前に必ず電子添文(注意事項等情報)を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。
 ・本製品の電子添文は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページで閲覧できます。

製造販売元
 株式会社メディコン
 カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

BD, the BD Logo, Avitene are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
 ©2024 BD. All rights reserved.
 BD-92957_2024.04.



BD AVITENE™

Microfibrillar Collagen Hemostat

コラーゲン使用吸収性局所止血材

BD アビテン™



BD アビテン™は強い接着性で創傷面を被覆し、 血小板を活性化させることで止血カスケードを促進します。



フラワータイプ

- 100%コラーゲンの持つ出血部への強い組織接着性
- 不規則な部位や入り組んだ出血部位にも適合
- 洗浄と吸引で余剰分の除去が可能
- 1gのカップ型パッケージ



シートタイプ

- 100%コラーゲンの持つ出血部への強い組織接着性
- 適用する部位や大きさに合わせてトリミング可能
- 平坦面や細長い部位にも適合
- 洗浄と吸引で余剰分の除去が可能
- 70mmx35mmと70mmx70mmの2種類のサイズ

脊椎脊髄外科、脳神経外科、泌尿器科、心臓血管外科、一般外科手術など、局所止血が適応となる様々な手術に使用できます²⁾。




硬膜外静脈叢における出血への適用例



骨と軟部組織からの出血への適用例



硬膜内静脈洞における出血への適用例

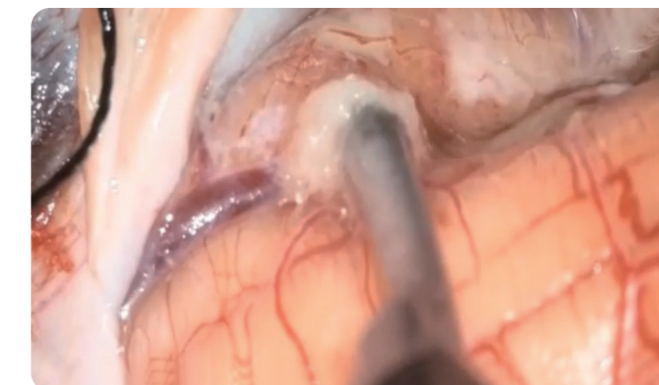

硬膜下における出血への適用例

BD アビテン™の止血メカニズム²⁾ ～血小板血栓(一次止血)の促進～

強い組織接着性により創傷面を被覆する。

出血点のコラーゲンを補うことで血小板粘着を促進する。

活性化した血小板が凝集して血小板血栓を形成する。

BD アビテン™の製品特長

100%コラーゲン

強い組織接着性
血小板を活性化

トロンビンフリー

特定生物由来ではない
即使用可能

2タイプの性状

適用部位に応じ
2種類から選択可能