



ハザードス・ドラッグ セーフティ 製品総合カタログ

販売名：BD ファシール 遮封式薬剤移注システム
販売名：BD ファシール プロテクタ ソーラス
販売名：BD ファシール IV ライン接続キット

医療機器承認番号：23000BZX00026000
製造販売届出番号：13B1X10407000134
製造販売届出番号：13B1X10407000169

* 販売名：BD ファシール 遮封式輸液システム
(製造販売元：アトムメディカル株式会社)

医療機器承認番号：23000BZX00025000

製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and BD PhaSeal are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2024 BD. All rights reserved.
26-044-10 2024.10 (BD-112631)




BD ファシール™ システム

調製、運搬、投与から 廃棄までのより安全な取扱いをサポート



調製

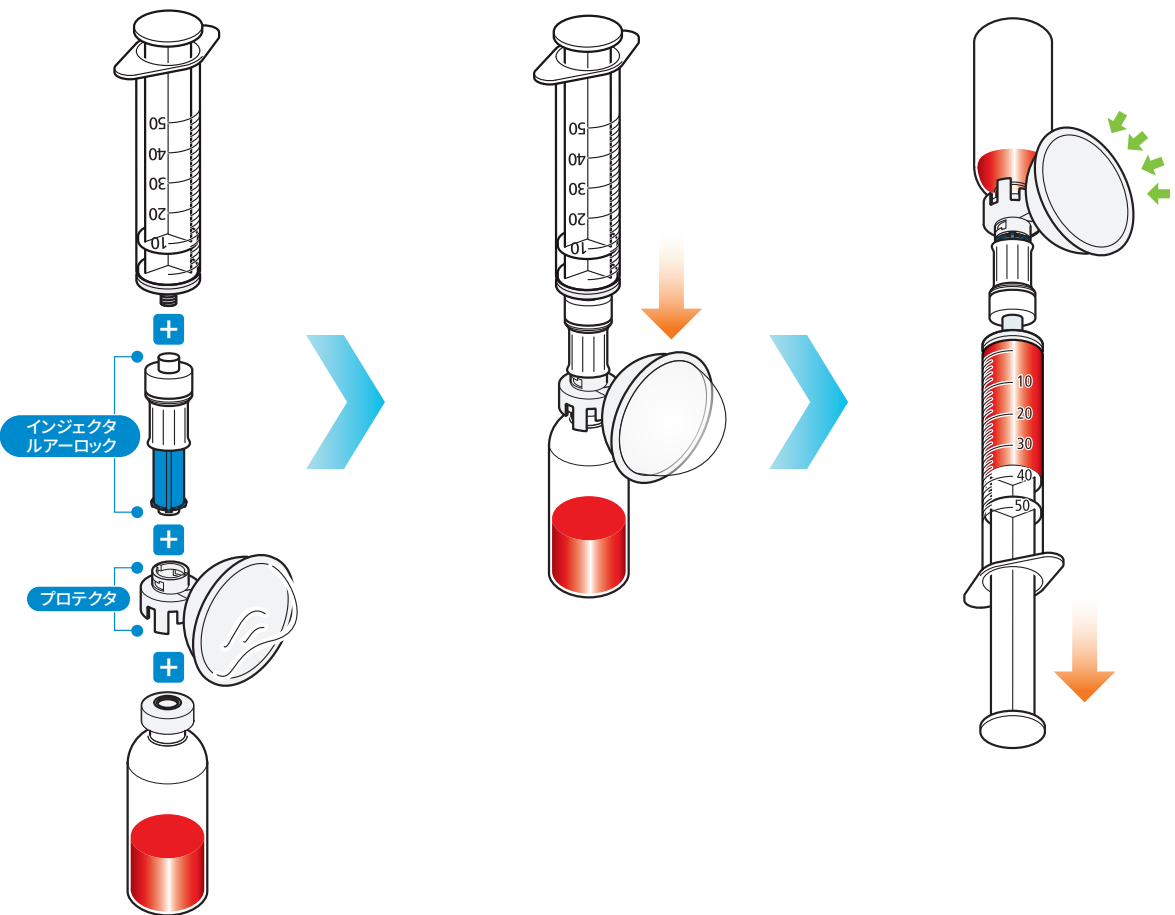

適切な薬剤調製のための3つの特長

等圧機能付き エクспанションブラダ



等圧機能を有するエクспанションブラダが薬液注出入時に生じる圧力を調整し、高い閉鎖性を保ちます。

針刺し損傷防止デザイン




針は封入されており、薬剤の注出入を密閉状態で行うことが出来ます。

ダブルメンブレン構造



すべてのBD ファシール™ システムは、接続部に特殊なメンブレンを使用しており、高い閉鎖性で薬剤の漏出を防ぎます。

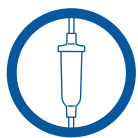


投与


プライミングセットタイプ (1薬剤1ライン)

抗がん薬の投与形式: 側管
薬剤交換: ライン単位

点滴筒有りタイプ

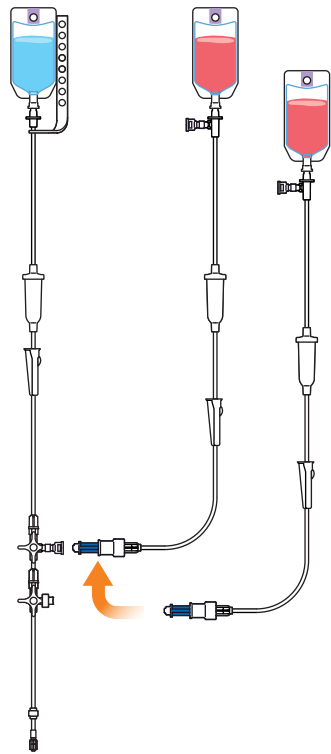


点滴筒無しタイプ

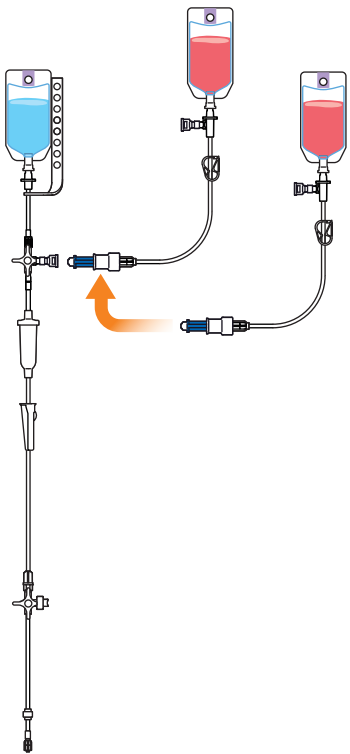


スパイクセットタイプ (1薬剤1スパイク)

抗がん薬の投与形式: 主管/側管
薬剤交換: 輸液バッグ単位


シングルタイプ

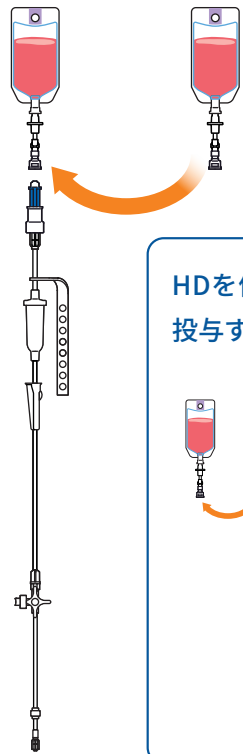


ダブルタイプ

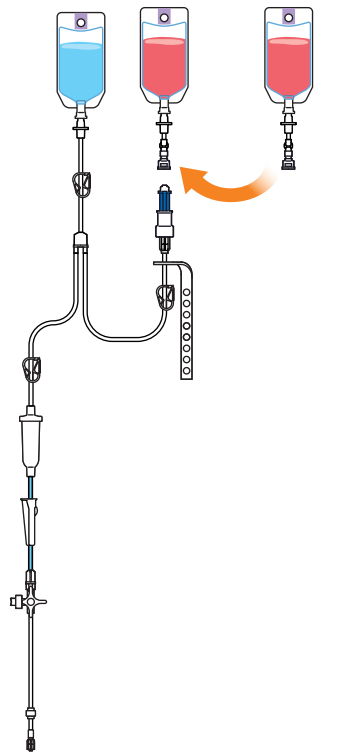






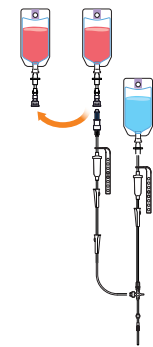


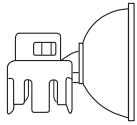
HDを側管から 投与する場合



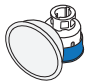


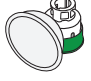BD ファシール™ プロテクタ

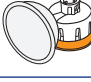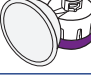製品形状	カタログ番号	製品名	包装単位	対応バイアル口径	対応容量
	515109	BD ファシール™ プロテクタ P14J	50個/箱	13mm	20mL
	515121	BD ファシール™ プロテクタ P15J	50個/箱	15mm	20mL
	515110	BD ファシール™ プロテクタ P21J	50個/箱	20mm	20mL
	515111	BD ファシール™ プロテクタ P50J	25個/箱	20mm	50mL
	515106	BD ファシール™ プロテクタ P50 マルチ	150個/箱	20mm	50mL
	515117	BD ファシール™ プロテクタ P55	25個/箱	20mm	50mL
	515112	BDファシール™ プロテクタ P53J	25個/箱	32mm	50mL
	515107	BDファシール™ プロテクタ P53P	25個/箱	32mm	50mL
	515113	BDファシール™ プロテクタ ソーラス P120J	50個/箱	20mm	—

マルチパック：個包装に5つのプロテクタが入っている。

出荷単位：1 箱

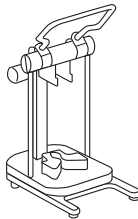


BD ファシール™ アッセンブリーフィクスチャー

カタログ番号	製品名	包装単位
515400	BD ファシール™ アッセンブリーフィクスチャー	1個/箱
515501	BD ファシール™ プロテクタP50Jキット	1セット/箱

515501 のキット内容：BD ファシール™ プロテクタ P50J 200 個 (8 箱)、アッセンブリーフィクスチャー 1 個 (1 箱)

出荷単位：1 箱

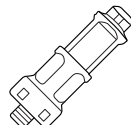

BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック

カタログ番号	製品名	包装単位
515008	BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック N35J	50個/箱
515005	BD ファシール™ インジェクタ ルアーロック N35マルチ	250個/箱

マルチパック：個包装に5つのインジェクタが入っている。

出荷単位：1 箱



BD ファシール™ スパイクセット*

カタログ番号	製品名	包装単位
515505-ZAT	BDファシール™ スパイクセット	80個/箱


出荷単位：1 箱



BD ファシール™ L コネクタ C90J

カタログ番号	製品名	包装単位
515309	BD ファシール™ Lコネクタ C90J	50個/箱


出荷単位：1 箱

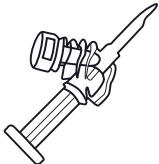

BD ファシール™ 輸液アダプタ C100J

カタログ番号	製品名	包装単位
515310	BD ファシール™ 輸液アダプタ C100J	50個/箱

出荷単位：1 箱

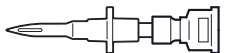


BD ファシール™ 輸液アダプタ C180J

カタログ番号	製品名	包装単位
515322	BD ファシール™ 輸液アダプタ C180J	50個/箱

出荷単位：1 箱


BD ファシール™ プライミングセット*

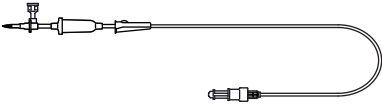

BD ファシール™ プライミングセットC60/20滴N35

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515510-ZAT	DEHPフリー	20滴	152cm	13mL	10本/箱

出荷単位：1 箱

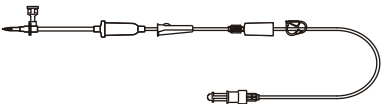


BD ファシール™ プライミングセットC60/20滴FN35KN2

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515519-ZAT	DEHPフリー	20滴	152cm	16mL	10本/箱

フィルター素材：親水性ポリエーテルスルホン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)

出荷単位：1 箱

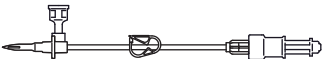

BD ファシール™ プライミングセットC60N35

カタログ番号	チューブ材質	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515511-ZAT	DEHPフリー	—	50cm	1.4mL	20本/箱

出荷単位：1 箱

BD ファシール™ 延長チューブ*




BD ファシール™ 延長チューブ C35三活×1

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	全長	プライミングボリューム	包装単位
515570-ZAT	DEHPフリー	1	50cm	3.2mL	20本/箱

出荷単位：1 箱


BD ファシール™ 輸液セット*

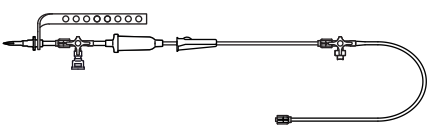

BD ファシール™ 輸液セットC35/20滴三活×1

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515530-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	206cm	13mL	10本/箱

出荷単位：1 箱

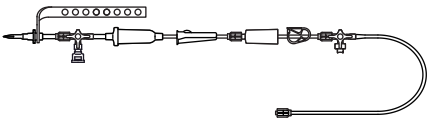


BD ファシール™ 輸液セットC35/20滴F三活×1

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515531-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	160cm	16mL	10本/箱

フィルター素材：親水性ポリエーテルスルホン(PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)

出荷単位：1 箱

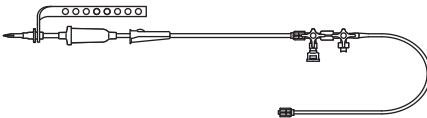


BD ファシール™ 輸液セット20滴C35三活×1

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515532-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	187cm	16mL	10本/箱

出荷単位：1 箱




BD ファシール™ 輸液セット(シングルタイプ) *

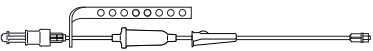

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴LL

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515540-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	131cm	13mL	15本/箱

出荷単位：1 箱

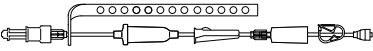


BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴FLL

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515544-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	131cm	16mL	15本/箱

フィルター素材：親水性ポリエーテルスルフォン (PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン (PVDF)


出荷単位：1 箱

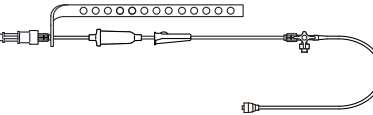

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴三活×1標70cmLL

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515541-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	201cm	16mL	15本/箱

出荷単位：1 箱

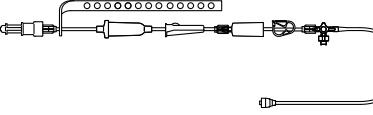

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F三活×1標70cmLL


0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515545-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	201cm	17mL	15本/箱

フィルター素材：親水性ポリエーテルスルフォン (PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン (PVDF)

出荷単位：1 箱


BD ファシール™ 輸液セット(ダブルタイプ) *

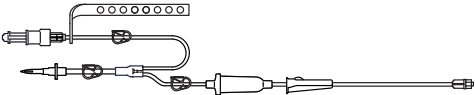

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴WLL

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515542-ZAT	DEHPフリー	—	20滴	142cm	16mL	10本/箱


出荷単位：1 箱

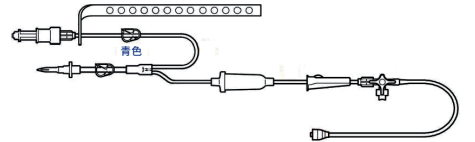

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴三活×1WBCLL

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515584-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	19mL	10本/箱

出荷単位：1 箱

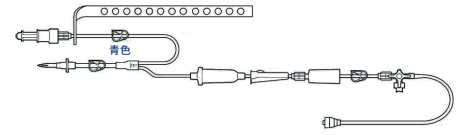


BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F三活×1WBCLL

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515585-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	21mL	10本/箱


出荷単位：1 箱

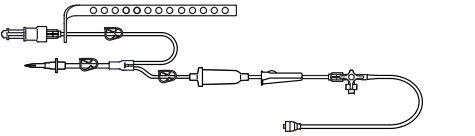

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴三活×1WLL

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515543-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	19mL	10本/箱

出荷単位：1 箱

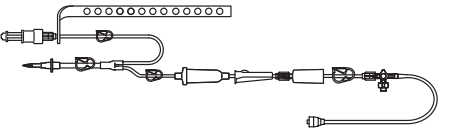

BD ファシール™ 輸液セットN35/20滴F三活×1WLL

0.2μm フィルター付き

カタログ番号	チューブ材質	Qサイト付三方活栓	点滴筒	全長	プライミングボリューム	包装単位
515547-ZAT	DEHPフリー	1	20滴	192cm	21mL	10本/箱

フィルター素材：親水性ポリエーテルスルフォン (PES)、疎水性ポリフッ化ビニリデン (PVDF)

出荷単位：1 箱

投与




BD ファシール™ IVライン接続キット

いつもの輸液ラインをBDファシール™システムにするためのキット

カタログ番号	製品名	包装単位
MFx2409	BD ファシール™ IVライン接続キット (DEHPフリー)	50個/箱

出荷単位：1 箱

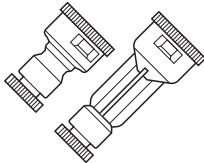


BD ファシール™ コネクタ ルアーロック

ルアーロック式の製品に接続することで、ファシールの受け口を作る変換アダプタ

カタログ番号	製品名	包装単位
515204	BD ファシール™ コネクタ ルアーロックC35J	50個/箱
515206	BD ファシール™ コネクタ ルアーロックC45J	50個/箱

出荷単位：1 箱

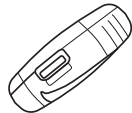

BD ファシール™ インフュージョンクランプ

BDファシール™ インジェクタ ルアーロックとコネクタ ルアーロックの接続を保護するためのクランプ

カタログ番号	製品名	包装単位
515403	BD ファシール™ インフュージョンクランプ	25個/箱

出荷単位：4 箱




BD ファシール™ インジェクタ キャップ

輸送時などにBDファシール™ インジェクタ ルアーロックのメンブレン部分を保護するためのキャップ

カタログ番号	製品名	包装単位
515404	BD ファシール™ インジェクタキャップM50	50個/箱

出荷単位：4 箱

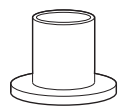

BD ファシール™ コネクタ キャップ

輸送時などにBDファシール™ コネクタ ルアーロックのメンブレン部分を保護するためのキャップ

カタログ番号	製品名	包装単位
515406	BD ファシール™ コネクタキャップ M70	50個/箱


出荷単位：4 箱

廃棄

BD® ケモセラピーコレクター

抗がん剤曝露防止用コンテナー

抗がん剤液漏れ防止のためのフタ接続部の
ガスケットと内部の吸収シート付廃棄容器

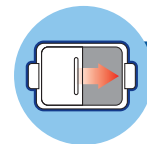

スライド式開閉



容量34.1L
(カタログ番号:305604)

※オプション
専用カート (カタログ番号:305091)

容量72.0L
(カタログ番号:305613)

※オプション
専用カート (カタログ番号:305093)



二面開閉



容量64.0L
(カタログ番号:305614)

※オプション
専用カート (カタログ番号:305092)

BD® ケモセラピーコレクター 抗がん剤曝露防止用コンテナー

カタログ番号	分類	容量	サイズ(1個あたり) (高さ×横幅×奥行き)cm	包装単位
305076	中型	11.3L	30.6 x 26.3 x 19.3	12個 / 箱
305604	大型(スライド式開閉)	34.1L	47.2 x 45.0 x 30.4	8個 / 箱
305613	特大(スライド式開閉)	72.0L	66.2 x 51.8 x 37.3	5個 / 箱
305614	特大(二面開閉)	64.0L	51.8 x 37.3 x 62.2	5個 / 箱

出荷単位：1 箱

オプション

カタログ番号	分類	対応製品	製品名	包装単位
305091	大型(ペダルあり)	34.1L	34.1L (305616/305604)用カート	1個 / 箱
305092	特大(ペダルなし)	64.0L	64.0L用カート(フットペダルなし)	1個 / 箱
305093	特大(ペダルあり)	72.0L	72.0L (305609/305613)用カート	1個 / 箱

出荷単位：1 箱