

BD™ Quincke

BD™ Whitacre

AGULHAS PARA ANESTESIA

Cada paciente é único, o que requer o método e as ferramentas adequadas para o procedimento.

Um dos principais critérios para escolher o tipo de anestesia é a **facilidade na recuperação**, o que inclui o controle da dor no pós-operatório, náuseas, vômitos e retenção urinária.¹

Recomenda-se a **anestesia geral** para garantir um início de ação relativamente rápido e para reduzir o stress, mas a prolongação do bloqueio motor pode aumentar o tempo de hospitalização e alguns efeitos secundários podem complicar o manejo do paciente.¹



A **anestesia regional** é uma técnica simples e confiável com uma taxa de sucesso superior a 90 %, se associada com um melhor controle das náuseas e vômitos pós-operatórios e uma maior possibilidade de receber alta mais rápido.¹


Por que a anestesia regional é utilizada?

A anestesia regional com anestésicos locais de curta duração é preferível à anestesia geral em cirurgias ambulatoriais, o que transmite um **alto grau de satisfação do paciente**.¹

ANESTESIA EPIDURAL

Útil para anestesia em cirurgia torácica, cirurgia intra-abdominal de grande porte ou cirurgia da coluna, uma vez que o relaxamento muscular não é necessário. Também pode ser usada para o controle da dor intra ou pós-operatória. **Pode diminuir o risco cirúrgico e a morbidade em determinadas populações**, por exemplo, pacientes com cardiopatia isquêmica.²



A **agulha Tuohy da BD** é a mais utilizada neste procedimento.²

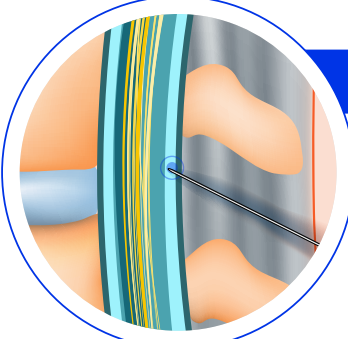

ANESTESIA RAQUIDIANA

É comumente usada para procedimentos cirúrgicos que envolvem o abdômen inferior, pelve, períneo e membros inferiores; é benéfica para procedimentos abaixo do umbigo.³

Há kits de anestesia raquidiana disponíveis comercialmente que incluem a agulha raquidiana **(Quincke o Whitacre) da BD**.³

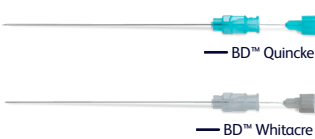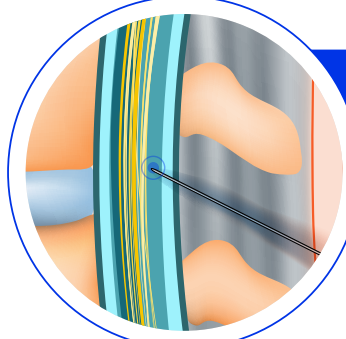

A **gama BD de agulhas e kits de anestesia** pode responder às necessidades dos anestesiologistas, sejam estas características de feedback tátil, nitidez ou penetração.

Os fatores mais comuns para essa escolha são:¹

- Decisão do paciente
- O medo do paciente da anestesia geral
- Estado de stress/ansiedade do paciente
- Qualidade de recuperação esperada
- Eficácia da técnica

- Projetados especificamente para procedimentos combinados raquidiano/epidural
- Contém agulha raquidiana BD™ Whitacre de classe mundial com um cubo que se ajusta perfeitamente à agulha epidural BD™ Weiss
- A agulha epidural BD™ Weiss tem abas maiores para proporcionar uma pegada mais segura, o que permite maior controle durante a inserção

Kits e Sets BD CSE Durasafe™

Agulhas raquidianas BD™ Quincke

Agulhas epidurais BD

Agulhas raquidianas BD™ Whitacre

- As aletas fixas da agulha peridural BD™ Weiss proporcionam maior comodidade e **ergonomia durante o manuseio**, permitindo maior controle da penetração e profundidade da agulha
- Tanto as agulhas BD™ Weiss quanto as BD™ Tuohy possuem marcas calibradas de profundidade da agulha para **ilustrar a profundidade**

- Fácil **visualização do LCE** para a colocação adequada da agulha
- Disponível em **26 tamanhos** desde 1 ½ a 7 pol. e em calibres de 18 a 27 G
- A disposição da chave/ranhura dos cubos de estilete e cânula, **facilita a orientação adequada do bisel da agulha**

- O **cubo transparente** permite a visualização imediata do LCE para a colocação adequada da agulha
- Disponível em **14 tamanhos** desde 3 ½ a 5 pol. e em calibres de 22 a 27 G
- Algumas têm **paredes finas**, projetadas para maximizar o fluxo através das agulhas do mesmo calibre

LCE: líquido cérebro-espinhal



BD

Há mais de 100 anos criando produtos de anestesia regional inovadores, confiáveis e de alta qualidade

Referencias: 1. Capdevila X, et al. Factors Determining the Choice of Spinal Versus General Anesthesia in Patients Undergoing Ambulatory Surgery: Results of a Multicenter Observational Study. *Adv Ther.* 2020;37(1):527-540. 2. Avila Hernandez AN, Singh. P. Epidural Anesthesia. [Updated 2022 Mar 9]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 3. Olawin AM, M Das J. Spinal Anesthesia. [Updated 2022 Jun 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022

Becton Dickinson México: Monte Pelvoux 111, Piso 8, 9 y PH, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México. 55 5999 8200 **Becton Dickinson Argentina:** Av. del Libertador 110 - 2° Piso, Tel: (+54 9 11) 5194 4936. Vicente López, Buenos Aires, Argentina **Becton Dickinson Chile:** Av. Andrés Bello, 2325 - piso 15 Tel: (+56 2) 2482 7800, Providencia, Santiago, Chile. **Becton Dickinson Colombia:** Vereda Vuelta Grande a 150 mts. de la Glorieta de Siberia Vía Cota, Cota, Cundinamarca PBX: (57-1) 7566060-5724250 **Becton Dickinson Perú:** Av. Javier Prado 492 Int. 501-San Isidro.

Entre em contato com um representante BD para consultar a disponibilidade na sua região.