
Sensor FloTrac

Guia de Configuração

1 Ligue o monitor e conecte o cabo de pressão HemoSphere à plataforma de monitorização avançada HemoSphere.



2 Selecione a tecnologia minimamente invasiva e, em seguida, selecione Iniciar Monitorização.

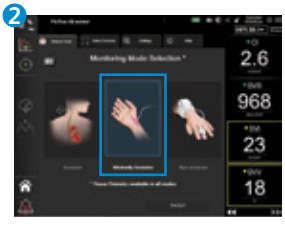

3 Abra a embalagem do sensor FloTrac e inspecione o conteúdo. Fixe o sensor FloTrac em um suporte de infusões usando o suporte adequado para o sensor.

4 Para retirar o ar da bolsa de soro, primeiro inverta a bolsa. Perfure a bolsa e mantenha a câmara de gotejamento na posição vertical. Certifique-se de que todo o ar foi removido. Insira a bolsa de soro na bolsa de pressão e pendure-a no suporte de infusões (não infle).



5 Não pressurize a bolsa para preparar o sistema - use apenas a gravidade. Lave o sensor FloTrac puxando o dispositivo Snap-Tab, enquanto segura o tubo de pressão na posição vertical até que a coluna de fluido atinja a extremidade do tubo.

6 Substitua todas as tampas por tampas sem ventilação e certifique-se de que todas as conexões estejam firmes.

BD

7 Pressurize a bolsa de pressão até chegar a 300 mmHg, depois faça o flush do sensor de acordo com o protocolo do hospital e certifique-se que não ficaram bolhas residuais no sistema.



8 Acople o conector verde do sensor FloTrac ao cabo de pressão HemoSphere.

9 Acople o conector vermelho do sensor FloTrac ao cabo do monitor de cabeceira.

10 Conecte o tubo ao cateter arterial .

11 Nivele o sensor FloTrac no eixo flebostático. **Observação: É importante manter o nível do sensor FloTrac no eixo flebostático em todos os momentos para garantir a precisão do débito cardíaco.**



12 Para zerar, abra a válvula da torneira do sensor para medir as condições atmosféricas:

1. Pressione e segure o botão físico zero no cabo de pressão para abrir a tela de ajuste zero.
2. Pressione e segure o botão físico zero até ouvir um sinal sonoro para concluir o teste.



Ou

O ajuste de zero também pode ser feito selecionando o botão **Quick Zero** para abrir a tela de ajuste de zero e, em seguida, selecionando **Zero**.



Exclusivo para uso de profissionais. Consulte as instruções de uso para obter informações completas de prescrição, incluindo indicações, contraindicações, avisos, precauções e eventos adversos.

Produto comercializado no Brasil pela Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Médico-Cirúrgicos Ltda. sob os Registros Sanitários: HemoSphere, 80219050168; Sensor FloTrac, 80219050086.

BD, BD logo, FloTrac e HemoSphere são marcas registradas da Becton, Dickinson and Company ou suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários.

©2026 BD. Todos os direitos reservados. BD-182992