

Grâce à la technologie Tru-Lok™, la seringue BD Integra™ a un volume mort extrêmement faible



Embout standard Luer-Lock



Technologie Tru-Lok™

Tru-Lok™ est une technologie unique (connexion à verrouillage, non-Luer), spécifique à la seringue BD Integra™ et son aiguille détachable.

Avec la technologie Tru-Lok™, le volume mort de l'aiguille montée sur la seringue n'est que de 0.026ml.

Un faible volume mort assure une perte minimale de médicament ainsi qu'une précision maximale de la dose injectée pour tout injectable de faible volume (≤ 2 ml) conditionné en flacons.

Ex. : Interféron γ 1b

Morphine

Hirudine

β -adrénergique

EPO

Radiomarqueurs (isotopes)...

La précision de la dose administrée est d'autant plus importante que le volume (≤ 2 ml) et/ ou le poids du patient (néo-natologie / prématuré) sont faibles.

DISPOSITIFS DE SECURITE POUR INJECTION

BD Integra™ Seringue avec aiguille détachable

REF	Seringue	Aiguille	Conditionnement
Seringue			
305283	3ml		1/100/400
Aiguille rétractable			
305310		25G 13mm	1/100/400
305311		25G 25mm	1/100/1000
305312		23G 25mm	1/100/1000
305313		22G 38mm	1/100/1000
Aiguille de transfert sécurité			
305275		18G 38mm	1/100/1000

BD SafetyGlide™ TNT

REF	Seringue	Aiguille	Conditionnement
Seringue Tuberculine / Allergie / Test sécurité			
305946	1ml	26G 10mm	1/100/400
305945	1ml	27G 13mm	1/100/400
Seringue à insuline sécurité			
305932	0.5ml	29G 13mm	1/100/400
305934	0.5ml	30G 8mm	1/100/400
305937	0.3ml	31G 8mm	1/100/400

BD Eclipse™

REF	Aiguille	Conditionnement
305895	21G 38mm	1/100/1200
305892	23G 25mm	1/100/1200
305760	25G 16mm	1/100/1200

BD Eclipse™ Combo

REF	Seringue LL	Aiguille	Conditionnement
305781	3ml	25G 16mm	1/50/300
305782	3ml	23G 25mm	1/50/300
305783	3ml	22G 40mm	1/50/300
305785	5ml	22G 40mm	1/50/300
305786	10ml	22G 40mm	1/50/300

BD™ Aiguille de Transfert Sécurité

REF	Aiguille	Conditionnement
Aiguille de Transfert, sans filtre		
305180	18G	1/100/1000
Aiguille de Transfert, avec filtre		
305211	18G	1/100/1000



BD Medical Systems
11, rue Aristide Bergès
38800 Le Pont-de-Claix
Tél. 04 76 68 36 36
Fax 04 76 68 36 93



Pour que chacun vive en bonne santé

Les avantages du système BD Integra™

Aiguille détachable



- Permet de changer d'aiguille après le transfert
- Technologie Tru-Lok™ pour :
 - Volume mort très faible
 - Connexion sûre

Une nouvelle ère dans la sécurité

Seringue BD Integra™ avec rétraction automatique de l'aiguille

Activation avant ou après la dépique

- Au choix de l'utilisateur
- Administration complète de la dose avant activation

Technologie BD Microlance™

- Assure le plus grand confort pour le patient
- La géométrie de la pointe de l'aiguille et sa finition assurent un traumatisme minimal

1 Préparation

Préparer l'injection selon les protocoles habituels à l'aide de l'aiguille de transfert sécurité Integra™.

2 Injection

Injecter selon les pratiques habituelles, en s'assurant que la dose complète ait été administrée (1^{er} « clic »).

3 Activation


En fin d'injection, appuyer sur le piston jusqu'au 2^{ème} « clic » afin d'activer le mécanisme de sécurité. L'activation peut se faire avant ou après la dépique. L'aiguille se rétracte dans le piston et le piston reste bloqué en position finale.

4 Elimination

Eliminer directement après l'utilisation dans un collecteur d'aiguilles approprié.

La seringue BD Integra™ : La combinaison d'une technologie innovante et d'une qualité reconnue.

AVANT ACTIVATION

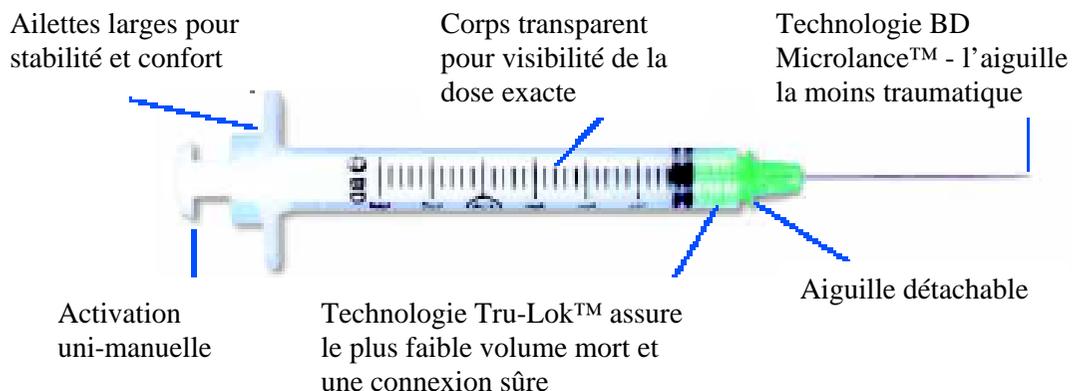

APRES ACTIVATION

